

Soluscope EZ



Środek dezynfekujący do automatycznej regeneracji endoskopu

Detergent do endoskopów giętkich, przeznaczony wyłącznie do stosowania z Soluscope Serie 1

- Detergent trójenzymatyczny
- Potwierdzona skuteczność w usuwaniu biofilmu i białek
- Zgodny z normą EN ISO 15883-4
- Kompatybilny z szeroką gamą endoskopów giętkich
- System uniemożliwiający błędne podłączenie



Soluscope EZ

Detergent do endoskopów giętkich, przeznaczony wyłącznie do stosowania z Soluscope Serie 1



Soluscope Serie 1

Skład produktu

- Niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne
- Środki sekwestrujące
- Kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza)
- Substancje pomocnicze

Charakterystyka produktu

- Przejrzysta, jasnożółta ciecz
- Gęstość w temp. 20°C: 1,09 mg/ml
- pH rozcieńczonego produktu (0,25%): ok. 8,5
- pH nierozcieńczonego produktu w temp. 20°C: ok. 6,7*
- pH produktu rozcieńczonego do 0,5%: ok. 7,6*
- Przewodność przy stężeniu 0,5%: 231 μ S/cm

*Pomiar wartości pH w warunkach roboczych za pomocą miernika pH z kompensacją temperatury.

Dostępne opakowania

Produkt	Ilość	Kod
Soluscope EZ	4 x 5 L	3105490

Sposób użycia


Zamocować nurnik z czarną nakrętką na kanistrze. Należy upewnić się, czy otwór odpowietrzający nie jest zablokowany. Umieścić kanister i podłączyć go do myjni-dezynfektora (patrz instrukcja obsługi myjni-dezynfektora). Automatyczne rozcieńczenie. Należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od daty podłączenia do myjni-dezynfektora (w odpowiednim miejscu wpisać datę otwarcia na etykiecie).

Przechowywanie

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych).

Wyroby medyczne stosuj ostrożnie

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.

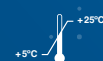

WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.