

Soluscope PA



Środek dezynfekujący do automatycznej regeneracji endoskopu

Preparat dezynfekcyjny do endoskopów giętkich

- Środek dezynfekujący na bazie kwasu nadoctowego
- Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego
- Zgodny z normą EN ISO 15883-4
- Kompatybilny z szeroką gamą endoskopów giętkich
- System zamykania na kluczyk i pojemnik ze zintegrowaną kaniulą



Soluscope PA

Stosować jedynie w urządzeniach Soluscope Serie 1 PA



Soluscope Serie 1 PA

Skład produktu

- 5% (w/w) kwas nadoctowy
- Stabilizatory

Charakterystyka produktu

- Przydatność do użycia: 14 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
- Wygląd: przezroczysty i bezbarwny
- Zapach: charakterystyczny
- pH czystego produktu*: 1 - 4,2
- Gęstość właściwa przy 20°C: 1,10 - 1,13
- Współczynnik załamania światła: 1,35 - 1,37
- Lepkość: < 10 mPa/s

*Pomiar wartości pH w warunkach roboczych za pomocą miernika pH z kompensacją temperatury.

Wyniki badań mikrobiologicznych

Spektrum działania	Stężenie	Temperatura	Czas działania
Bakteriobójczy* - Zgodnie z EN 13727, EN 14561	1%	40°C	6 minut
Prątkobójczy* - Zgodnie z EN 14348, EN 14563	1%	40°C	6 minut
Grzybobójczy* - Zgodnie z EN 13624, EN 14562	1%	40°C	6 minut
Wirusobójczy* - Zgodnie z EN 14476, EN 17111	1%	40°C	6 minut

*=warunki czyste

Dostępne opakowania

Produkt	Ilość	Kod
Soluscope PA	4 x 5 L	3105490

Sposób użycia

- Wstawić kanister do urządzenia
- Nakręć białą zakrętkę podłączoną do Soluscope Serie 1 PA na zbiornik (postępuj według instrukcji obsługi myjni-dezynfektora)
- Należy upewnić się, czy otwór odpowietrzający nie jest zablokowany
- Dozowanie automatyczne = 1% (10 ml/L), 40°C, 6 min


Zużyć w ciągu 2 miesięcy od daty podłączenia do urządzenia (datę otwarcia należy zapisać na etykiecie w przeznaczonym do tego miejscu).

Przechowywanie

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych).

Wyroby medyczne stosuj ostrożnie

Klasa IIb. Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.

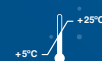

WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.